

*Ne rêvez plus d'un corps
parfait obtenez le !*

*La première Cryolipolyse
Intelligente*



La Cryolipolyse by CryoGeneSys®



Le CryoGeneSys® utilise une méthode d'**amincissement** localisée **par le froid**, non invasive et indolore : la **Cryolipolyse**.

Par l'action associée du chaud et du froid, le CryoGeneSys® combine l'aspiration d'un amas graisseux et son refroidissement prolongé à une température de 0°C pour une durée idéale de **60 minutes**.

Cette méthode d'amincissement exploite les propriétés du froid pour générer l'effet naturel «Apoptose», c'est la destruction progressive des cellules graisseuses.

La Cryolipolyse by CryoGeneSys® offre une **élimination moyenne de 30% d'un amas graisseux** sans léser les tissus adjacents dès la première séance et dans un confort optimal grâce à sa Cryode® ovoïde.

USER ASSIST® - Logiciel Intelligent

En exclusivité dans la Cryolipolyse, le CryoGeneSys® intègre USER ASSIST®.

USER ASSIST® est un logiciel intelligent qui **sécurise la séance** grâce à un **diagnostic** automatisé de l'amas graisseux. Il **analyse** ses données cutanées (volume, résistance, densité...) pour **personnaliser** la séance aux besoins de chacun. Il **assure** ainsi l'obtention des meilleurs résultats possibles en **amincissement à hauteur de 95%**.

Analyse Intelligente

Composition de l'amas graisseux




Détermination de la position optimale de la Cryode®

Adaptation physiologique

Détermination de la position optimale

Confort de la séance

Performances thermiques

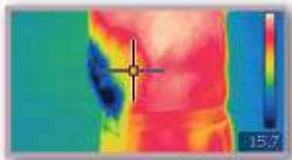

Homogénéité et action localisée du froid dans l'hypoderme*



Application d'une Cryode®

*Photos réalisées en fin de séance par caméra thermique FLIR-360 T, haute résolution

Résultats durables



Avant / Après 3 séances




** Photos prises par Dr. Vigneron

*** Photos prises par le Centre MediAge

Déroulement de la séance



 60 minutes

 Soin main-libre

 Sans consommable

 Indolore

 2 Cryode® en simultanés

Caractéristiques techniques

Cryode®	Ovoïde / 4 plaques Peltier (extracteur de chaleur)
Dimensions Cryodes®	Grande Cryode® : 161 cm ² de surface de soin Petite Cryode® : 57 cm ² de surface de soin
Soin	2 zones Corporelles & 1 Visage (sonde Cryo optionnelle) en simultanés
Vacuum	Gestion automatisée par USER ASSIST® 0 à 450 mbar
Température	+ 37 °C / 0° C
Protocole	Programme automatique
Interface graphique	Ecran tactile 7 pouces à haute résolution
Logiciel	Gestion par port USB
Fonctionnement	Tension électrique 280 W / Système mécanique de refroidissement d'eau
Dimensions	60cm x 35cm x 118cm
Poids	32 kg

